

# Važna uputstva – Ne uništavati



Ovaj proizvod je zaštićen sledećim patentom(ima): US 7,180,037 B2

## Uputstvo za upotrebu MHP podloge za grejanje za sto za masažu

Postavite podlogu za grejanje na sto za masažu. Preporučuje se da kraj sa ulazom za kontroler bude na suprotnom kraju stola od onog gde bi se nalazila glava pacijenta. Fiksirajte podlogu za grejanje elastičnim trakama na svakom uglu i pokrijte je čaršavom ili velikim peškirom. Pravilno povežite kontroler sa podlogom (kao što je prikazano ispod) i bezbedno uključite kabl za napajanje, isključivo na naizmjeničnu struju od 230 volti.


Ako LED dioda prikazuje „F“: Proverite da li su svi priključci dobro pričvršćeni. Isključite kontroler iz utičnice i sačekajte najmanje 20 sekundi pre nego što ga ponovo uključite u utičnicu.

### Uključivanje

Za uključivanje, pritisnite dugme On/Off koje se nalazi u donjem središnjem delu kontrolera ispod LED ekrana. Ekran će se upaliti i biti spreman za podešavanje temperature i vremena „automatskog isključivanja“.

### Podešavanje temperature

Levi skup dugmadi „+“ i „-“ ispod znaka „HEAT“ kontroliše temperaturu od nivoa 1 do nivoa 10. Temperatura predstavljena različitim nivoima, kao što je prikazano na ekranu, naznačena je na poledini stranice.

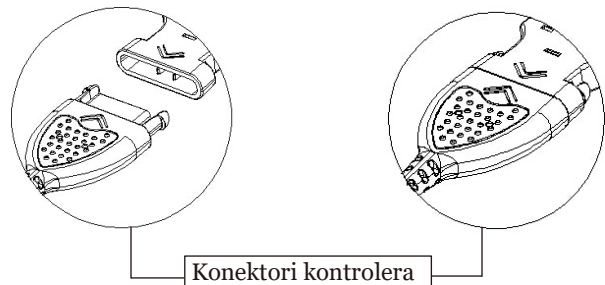

# Važna uputstva – Ne uništavati

| Nivo temperature | LCD displej | Celzijus | Farenhajt |
|------------------|-------------|----------|-----------|
| 1                | L           | 37       | 98.6      |
| 2                | 2           | 40       | 104.0     |
| 3                | 3           | 42       | 107.6     |
| 4                | 4           | 45       | 113.0     |
| 5                | 5           | 47       | 116.6     |
| 6                | 6           | 50       | 122.0     |
| 7                | 7           | 52       | 125.6     |
| 8                | 8           | 55       | 131.0     |
| 9                | 9           | 57       | 134.6     |
| 10               | H           | 60       | 140.0     |

5,4F (ili 3°C) je moguća osetljivost.

### Tajmer za automatsko isključivanje

Desni skup dugmadi „+“ i „-“ ispod znaka „AUTO OFF“ kontroliše trajanje zagrevanja pre nego što se podloga za grejanje automatski isključi. Podrazumevano trajanje „automatskog isključivanja“ je 1 sat, međutim, ako vam je potrebna duža ili kraća upotreba, možete jednostavno dodirnuti „+“ ili „-“ da biste podesili tajmer „automatskog isključivanja“ od 1 do 10 sati, respektivno. Kada se automatski isključi, morate ponovo pritisnuti dugme on/off ako želite da ga ponovo pokrenete. Ova funkcija vam omogućava da ne brinete da ćete slučajno zaboraviti da isključite podlogu za grejanje.

### Bezbednosna upozorenja

1. Nemojte savijati niti uvijati grejnu podlogu dok je uključena. Neravnomerno zagrevanje može aktivirati sistem zaštite od pregrevanja i trajno onеспособiti podlogu. (Ako dođe do neuobičajeno visoke temperature, regulator automatski prekida napajanje radi bezbednosti korisnika.)
2. Grejna podloga se ne sme peglati.
3. Grejna podloga se ne sme koristiti u neposrednom dodiru sa drugim grejnim uređajima, kao što su grejalice za stopala, termofoori i slično.
4. Ne ubadajte igle ili pribadače, ne grebite podlogu oštrim predmetima i ne udarajte je tupim predmetima.

5. Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno osobe bez dovoljno iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbednu upotrebu i razumeju moguće opasnosti.
6. Deca ne smeju da se igraju uređajem.
7. Deca ne smeju da čiste niti održavaju uređaj bez nadzora.

### Ograničena dvogodišnja garancija

MHP International garantuje prvobitnom kupcu da je ovaj proizvod bez nedostataka u materijalu, dizajnu i izradi u periodu od 2 godine od datuma kupovine. Ako se utvrdi da je proizvod neispravan tokom garantnog roka, MHP International se slaže da popravi ili zameni

### Pažnja:

**Ova podloga za grejanje možda neće biti vruća na dodir jer je nivo toplote dizajniran tako da se oseća toplota samo kada LEŽITE ili SEDITE na njoj.**